

STAT-Site WB



Confiable y eficiente
Medición de β -ketonas en
Sangre Completa y Capilar

-
- ❖ CLIA Waived
 - ❖ Resultados en solo 5-10 segundos
 - ❖ Equipo de Mano
 - ❖ Fácil de usar

Medición simple, precisa y eficiente de β -ketonas

Simple y intuitivo

- Inicio automático cuando se inserta la tira.
- Cuenta atrás del tiempo de reacción automática.
- Apagado automático después de 3 minutos sin acción.
- Toque el botón para expulsar la tira reactiva
- Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V.
- 400 resultados almacenados en el sistema

Preciso con excelente lineal rango


- **Rango de medición:**
 β -cetona: 0,1 a 0.6 mmol / L
- **Rango de hematocrito:**
 β -cetona: 10 a 70%

Rápido y eficiente manejo de muestras

- 1 μ L de sangre capilar o venosa de tamaño de muestra (Anticoagulante Heparina de Sodio)
- Resultado de β -cetonas en 10 segundos
- Estabilidad de las tiras después de abierto 6 meses y control 3 meses.

Ergonómico diseño

- Compacto: 95,5 (largo) x 57 (ancho) x 15 (alto) mm, 58 g
- Interfaz de pantalla LCD grande y simple
- Identificación automática de control de calidad

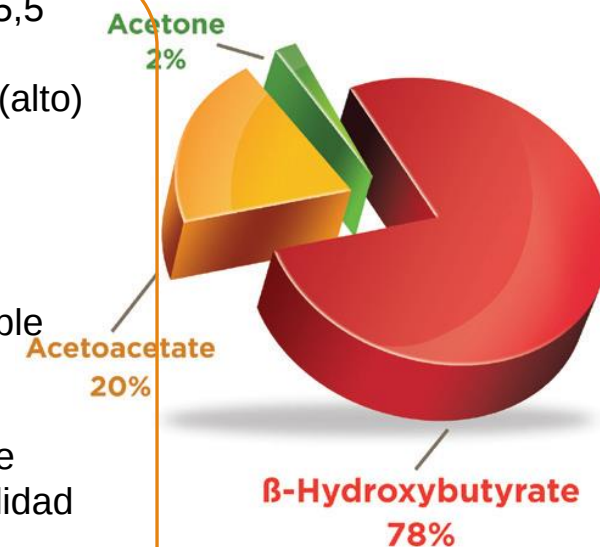

STAT-Site WB



Inserte la tira reactiva en el medidor



Agregar muestra de sangre



Resultado en 10 segundos para β -cetona
y 5 segundos para glucosa